

# 作業報告書兼概算見積書

2020年12月22日

# PHILIPS

## お客様情報

ご施設名  
国立研究開発法人 国立がん研究センター 中央病院 御中  
ご担当者 鳥居 様  
ID No. JP100100-012

株式会社フィリップス・ジャパン  
〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル  
お客様窓口  
電話 0120-556-494 (03-3740-3213)

## 受付情報

受付番号 0116100497 受付日 2020年09月11日  
サービスオーダー番号 52367855 作業区分 Preventative Maintenance

## 対象機器

システム名 Digital Diagnost シリアル番号 SN16000415  
システムコード 712031

## 作業時間

Operation	種類	作業者	作業日	開始時間	終了時間	作業時間
0010	PMIAI - Planned maintenance	YOJIRO MOTOYAMA	2020/12/22	17:30	21:00	3.50
0010	PMIAI - Planned maintenance	YOJIRO MOTOYAMA	2020/12/22	21:00	21:30	0.50

## 使用部品

部品番号	部品名	シリアル番号	バッチ番号	個数	定価
------	-----	--------	-------	----	----

## 現象及び作業内容


12/22/2020 21:07:06 YOJIRO MOTOYAMA(81100213)  
[ご依頼内容]保守定期点検  
[作業内容詳細]サービスマニュアルに従い保守契約に基づく保守定期点検を実施致しました。  
エックス線管球の管電流調整実施致しました。  
フラットパネル4種類の調整実施致しました。  
アンブリマット感度測定実施致しました。  
清掃作業を実施致しました。  
各種、動作チェックならびに調整作業を実施致しました。  
マニュアル内の要求事項を全て満たしております。装置の動作に問題ございません。  
詳細は後日点検報告書をご提出致します。  
[他の故障/処置]無し  
[装置の状態]装置使用可  
[作業の状況]作業完了  
[その他]同行作業者Ope:20 /種類:SPEC/作業者:飯塚 辰也 /作業日 2020年12月22日 16:00-21:30/作業時間5.5Hr  
22-Dec-2020 81100213 FSE Handover Tool1.3.4.32612.DB13 20201001

## 署名欄

・お客様用  
上記作業内容を確認致しました。

・お客様用  
裏面のサービスの一般条件(サービス条件)に合意し、  
上記作業内容を確認致しました。

・弊社作業担当者用

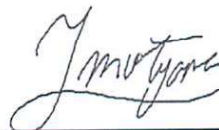

本山 陽二郎

・本作業についてのお問い合わせは、上記サービスオーダー番号を元に上記カスタマーケアセンターまでお願い致します。

# 作業報告書兼概算見積書

2020年12月22日

## お客様情報

ご施設名  
国立研究開発法人 国立がん研究センター 中央病院 御中  
ご担当者 鳥居 様  
ID No. JP100100-012

# PHILIPS

株式会社フィリップス・ジャパン

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル  
お客様窓口  
電話 0120-556-494 (03-3740-3213)



## 受付情報

受付番号	0116704910	受付日	2020年12月18日
サービスオーダー番号	52849338	作業区分	Corrective Maintenance

## 対象機器

システム名	Digital Diagnost	シリアル番号	SN16000415
システムコード	712031		

## 作業時間

Operation	種類	作業者	作業日	開始時間	終了時間	作業時間
0010	CMAI - Corrective maintenance	YOJIRO MOTOYAMA	2020/12/22	16:00	16:30	0.50

## 使用部品

部品番号	部品名	シリアル番号	バッチ番号	個数	定価
451213328083	Vertical Drive Assy. VS1 'in'			1	

## 現象及び作業内容

12/22/2020 21:06:44 YOJIRO MOTOYAMA(81100213)

[ご依頼内容]

立位動かす際に動きづらい

[現象確認]

確認出来ました。

[作業内容詳細]立位上下動作時とモーター部と上下動作連結部分が滑って上下動作の追従性が悪くなっていました。

モータドライブユニット交換にて改善致しました。

[他の故障/処置]無し

[装置の状態]装置使用可

[作業の状況]作業完了

[その他]同行作業者Ope:20 /種類:CMAI/作業者:森澤 一樹 /作業日 2020年12月20日 16:00-17:30/作業時間1.5Hr

22-Dec-2020 81100213 FSE Handover Tool1.3.4.32612.DB13 20201001

## 署名欄

・お客様用

上記作業内容を確認致しました。

・お客様用

裏面のサービスの一般条件(サービス条件)に合意し、  
上記作業内容を確認致しました。

・弊社作業担当者用

本山 陽二郎

・本作業についてのお問い合わせは、上記サービスオーダー番号を元に上記カスタマーケアセンターまでお願い致します。

# 作業報告書兼概算見積書

2020年12月22日

# PHILIPS

## お客様情報

ご施設名  
国立研究開発法人 国立がん研究センター 中央病院 御中  
ご担当者 鳥居 様  
ID No. JP100100-012

株式会社フィリップス・ジャパン  
〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル  
お客様窓口  
電話 0120-556-494 (03-3740-3213)

## 受付情報

受付番号	0116703092	受付日	2020年12月18日
サービスオーダー番号	52848544	作業区分	Corrective Maintenance

## 対象機器

システム名	Digital Diagnost	シリアル番号	SN16000415
システムコード	712031		

## 作業時間

Operation	種類	作業者	作業日	開始時間	終了時間	作業時間
0010	CMAI - Corrective maintenance	YOJIRO MOTOYAMA	2020/12/22	16:30	17:30	1.00

## 使用部品

部品番号	部品名	シリアル番号	バッチ番号	個数	定価
------	-----	--------	-------	----	----

## 現象及び作業内容

12/22/2020 21:10:53 YOJIRO MOTOYAMA(81100213)

[ご依頼内容]

Skyplate Smallのアーチファクトが目立つ

[現象確認]

確認出来ました。右上、右下、左下に複数の粒状のアーチファクト

[作業内容詳細]過去に同じ現象で調整を行っていましたが、一時的に改善するものの、最近ではアーチファクトの数も増加したため

Skyplate交換致しました。

[他の故障/処置]無し

[装置の状態]装置使用可

[作業の状況]作業完了

22-Dec-2020 81100213 FSE Handover Tool1.3.4.32612.DB13 20201001

## 署名欄

・お客様用

上記作業内容を確認致しました。

・お客様用

裏面のサービスの一般条件(サービス条件)に合意し、  
上記作業内容を確認致しました。

・弊社作業担当者用



本山 陽二郎

・本作業についてのお問い合わせは、上記サービスオーダー番号を元に上記カスタマーケアセンターまでお願い致します。